



BIOPLAST® Sportmundschutz


Für jede Anforderung der richtige Sportmundschutz-Typ







Für jede Anforderung:

Drei Sportmundschutz-Typen

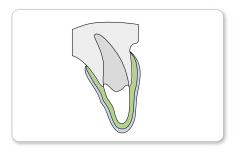

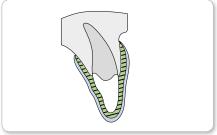

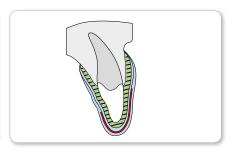

BIOPLAST®:

- Für alle Aktivitäten im Freizeitund Breitensport.
- Zweischichtiger Folienaufbau mit hohem Schutz und Tragekomfort.
- Es stehen diverse Farben und Farbkombinationen zur Auswahl.

BIOPLAST® XTREME:

- Geeignet für Kontaktsportarten, Schutz vor harten und kleinflächigen Schlägen.
- Zweischichtiger Folienaufbau mit bestem Schutz und Tragekomfort.
- Mit integriertem Verstärkungssegment im Frontzahnbereich.

BIOPLAST® XTREME PRO:

- Für Kontaktsportarten im Profisport mit zu erwartenden kleinflächigen und harten Schlägen (Schlagkräfte werden flächig verteilt).
- Vierschichtiger Folienaufbau für ein Höchstmaß an Schutz und Tragekomfort.
- Mit integriertem Verstärkungssegment und ergänzender hart-elastischer Zwischenlage im Frontzahnbereich.

BIOPLAST®

Das Sortiment der BIOPLAST® COLOR und MULTICOLOR Produktlinie weist eine Vielzahl an Farben und Mustern aus. Somit ist der Individualisierung keine Grenze gesetzt.





** Basismaterial. Für eine ausreichende Schutzwirkung muss eine 2. Schicht auflaminiert werden

BIOPLAST® COLOR**

// 3,0 x 125 mm*	○ klar	3187
// 3,0 x 125 mm*	rot	3382
// 3,0 x 125 mm*	O blau-transparent	3356
// 3,0 x 125 mm*	orot-transparent	3355
// 3,0 x 125 mm*	○ weiß	3445
// 3,0 x 125 mm*	schwarz	3448
// 3,0 x 125 mm*	neonrot	3352
// 3,0 x 125 mm*	neongrün	3353
// 3,0 x 125 mm*	azurblau	3354
// 3,0 x 125 mm* Color-Set	Je ein Stück klar, blau-transparent, rot-transparent, gelb, rot, weiß, schwarz, neonrot, neongrün, azurblau.	3271


* jeweils 10 Stück Die Farbe gelb ist ausschließlich im Color-Set und nicht einzeln erhältlich.

BIOPLAST® MULTICOLOR**

// 3,0 x 125 mm*	Germany	3390
// 3,0 x 125 mm*	• France	3391
// 3,0 x 125 mm*	Italy	3392
// 3,0 x 125 mm*	Spain	3393
// 3,0 x 125 mm*	Sweden	3394
// 3,0 x 125 mm*	Brazil	3395
// 3,0 x 125 mm*	◆ Transylvania	3396
// 3,0 x 125 mm*	Atlantis	3397
// 3,0 x 125 mm*	White Dots	3398
// 3,0 x 125 mm*	Green Dots	3399
// 3,0 x 125 mm*	O Multicolor Set	3400

BIOPLAST® XTREME

Eine Tiefziehfolie – zwei Härtegrade!

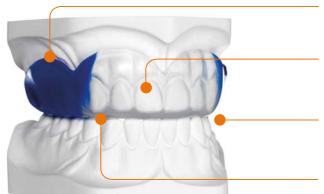

Farbiges Seitensegment aus

BIOPLAST® 3,0 mm Shore 80 A

Frontales, klar-transparentes Verstärkungssegment aus BIOPLAST® XTREME 3,0 mm Shore 92 A

Das **V-Design** der Folie erlaubt ein Verschieben des Modells, so dass jeweils die individuelle Frontzahnbreite durch das Verstärkungssegment erfasst wird.

Laminierte Abschlussfolie, klar-transparent aus BIOPLAST® 2,0 mm Shore 80 A bzw. 1,0 mm (BIOPLAST® XTREME PRO)





BIOPLAST® XTREME

// 4,0 x 125 mm*	rot	3295
// 4,0 x 125 mm*	blau	3296
// 4,0 x 125 mm*	schwarz	3297
// 4,0 x 125 mm*	○ klar	3298
// 5,0 x 125 mm*	rot	3286
// 5,0 x 125 mm*	blau	3287
/ / 5,0 x 125 mm*	schwarz	3288
// 5,0 x 125 mm*	○ klar	3289
* jeweils 10 Stück. Nur für MINISTAR® ab 4/92 u	und BIOSTAR® ab 4/99	< €

// BIOPLAST® XTREME Kit* 1x BIOPLAST® XTREME-Folie (5,0 x 125 mm), 1x CETRON® Reinigungspulver à 15 g, 1x BIOPLAST®-Isoliermittel, Retainerdose 1x Herstellanleitung	• rot	3283
BIOPLAST® XTREME Kit* Inhalt wie oben	blau	3284

// BIOPLAST® XTREME Kit* ● schwarz 3285 Inhalt wie oben

 \subset \in

BIOPLAST® XTREME PRO

Neben der integrierten Verstärkung im Frontzahnbereich verfügt dieser Sportmundschutz zusätzlich über eine hartelastische Zwischenlage.



BIOPLAST® XTREME PRO

INDELAST® XTREME PRO Kit 1x BIOPLAST® XTREME-Folie (4,0 x 125 mm), 1x BIOPLAST®-Folie klar (2 mm), 1x DURAN®-Folie (0,75 mm), 1x CETRON® Reinigungspulver à 15 g, 1x BIOPLAST®-Isoliermittel, Retainerdose 1x Herstellanleitung	● rot	3292
BIOPLAST® XTREME PRO Kit* Inhalt wie oben	blau	3293
// BIOPLAST® XTREME PRO Kit* Inhalt wie oben	schwarz	3294

 $^{^{\}star}$ nur für MINISTAR® ab 4/92 und BIOSTAR® ab 4/99

Retainerdosen

Für eine saubere, hygienische Aufbewahrung des BIOPLAST®-Sportmundschutzes. In fünf Farben.

// Retainerdosen

5435

* jeweils 10 Stück.



Finier-Set

Sortiment mit acht Schleifkörpern – mit Farbcodierung zur einfachen Zuordnung – zum Trennen, Ausarbeiten und Finieren von weichelastischen und hartelastischen Folien.

// Finier-Set

3378

inkl. je 1 Trennfräser, Finierfräser, HM-Schneidfräser, HM-Tricutter fein, BIOPERM-Trimmer, POLYFIX, OSAMU-Polierer, DIMO®PRO SLIM und Zurichtstein



Trimmer und Polierer

Für optimale mechanische End- und Feinbearbeitung der BIOPLAST®-Folien. BIOPERM-Trimmer zur Randbearbeitung. POLYFIX zur Freilegung der Lippen-/ Wangenbänder. OSAMU-Polierer zur Glanzpolitur.

// BIOPERM-Trimmer	blau, 2 Stück	3226
// POLYFIX auf Mandrell	braun, 1 Stück	3371
// POLYFIX	braun, 6 Stück	3372
// OSAMU-Polierer	grau, 2 Stück	3247



DIMO®PRO

Elastomergefüllte, hoch standfeste Ausarbeitungsscheibe für BIOPLAST®-Folien, inkl. Mandrell.

// DIMO®PRO	Scheibe 24 x 6 mm	3381
// DIMO®PRO SLIM*	Scheibe 24 x 4 mm	3376

jeweils 10/50 Stück * zum Rand verjüngt



BIOPLAST®-Isoliermittel

Isolierung für Gipsmodelle bei der Verarbeitung von BIOPLAST®- Tiefziehfolien, speziell bei Positioner und Sportmundschutz. Sorgt für absolute Transparenz und glatte Innenflächen.

// BIOPLAST®-Isoliermittel, 500 ml

3189



Druckwerke

Flyer und Poster zur Patienteninformation erhältlich.

// BIOPLAST® Patientenflyer	0308
// BIOPLAST® Poster	0388

Weitere Informationen über die Herstellung des BIOPLAST®-Sportmundschutzes entnehmen Sie bitte unseren Anwendungsbroschüren und dem Herstellungsvideo unter www.scheu-dental.com.



