


Quad Helix

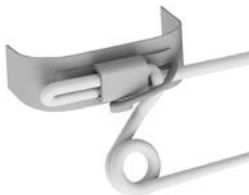

Beschreibung/Indikation: Konfektionierter Expansionsbogen aus CHROMIUM Draht (Ø 0,9 mm) zur Befestigung an den oberen Molaren in Palatinalschlössern.

Kontraindikation: Produkt enthält Nickel und Chrom. Bei Allergien gegen diese Bestandteile sollte die Quad Helix nicht angewendet werden.

Anwendung: Die Quad Helix sollte mit Stahl- oder Elastic Ligaturen fest in das Lingual-/Palatinalschloss einligiert werden!

Hinweis: Nur für die oben genannte Indikation und durch qualifiziertes Fachpersonal zu verwenden. Zur Einmalverwendung. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes sind unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden!

CE 0044



SCHEU-DENTAL GmbH
www.scheu-dental.com

Am Burgberg 20
58642 Iserlohn · Germany

phone +49 2374 9288-0
fax +49 2374 9288-90

SCHEU
SCHEUGROUP

DE/GB 500/01/23 G REF PM0115.01

