


BIOSTAR® 4-Aligner

Die Innovation für mehr Produktivität
ohne Kompromisse bei der Qualität.



Ein neues Level in der Tiefziehtechnik.

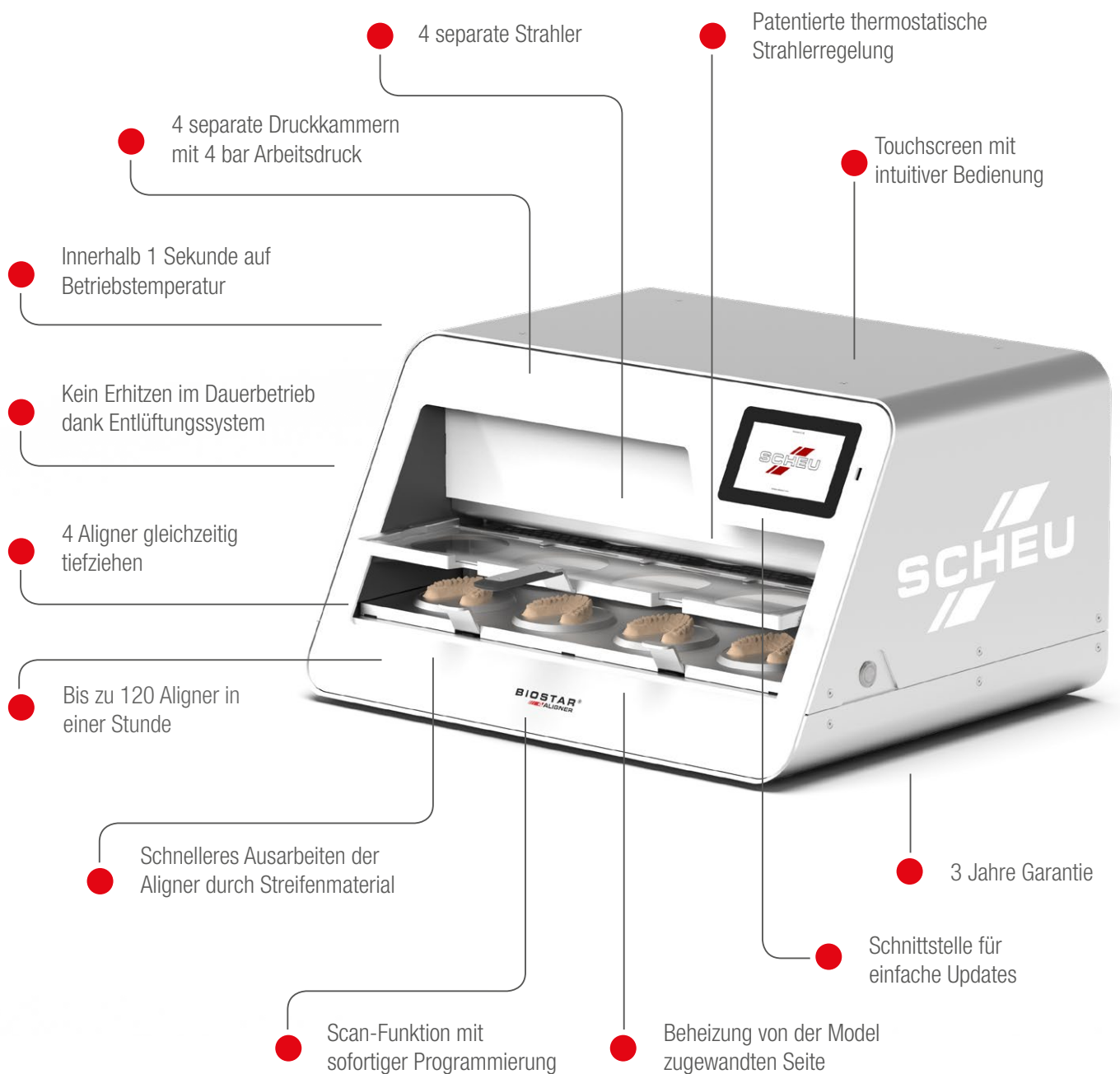

Ein Gewinn für Ihren Labor- und Praxisalltag!

Produktiv, präzise und flexibel - starten Sie jetzt Ihre eigene High-End Produktion und ziehen Sie bis zu 4 Aligner gleichzeitig tief.



Hohe Produktivität

Gestalten Sie Ihren Workflow komfortabler und effizienter. Mit dem BIOSTAR® 4-Aligner ist es möglich, 4 Folien gleichzeitig tiefzuziehen und so bis zu 120 Aligner in einer Stunde zu produzieren.



Präzise Ergebnisse

Jede Folie wird individuell in der eigenen Druckkammer beheizt und bei 4 bar tiefgezogen. Dabei legen sich die Folien perfekt an den Zahnkranz an und erreichen eine ideale Abformung bei gewohnt hoher Qualität.



Flexible Prozesse

Mit dem BIOSTAR® 4-Aligner stehen Ihnen verschiedene SCHEU-DENTAL Folienformate zur Auswahl, die Sie individuell für Ihre Prozesse nutzen können: Runde Folien (Ø 120-125 mm) oder rechteckige, exklusiv bei SCHEU-DENTAL erhältliche Strips für eine Vierfanchanwendung (499 x 114 mm).

Features BIOSTAR® 4-Aligner

BIOSTAR® 4-Aligner	95-230V
REF	#3030
Leistung	1450 Watt
Arbeitsdruck	4 bar
Maße (B x H x T)	612 x 337 x 524 mm
Gewicht	50 kg

Eine unschlagbare Kombination.

Mit dem innovativen Folienformat von SCHEU-DENTAL zum perfekten Ergebnis.



Die exklusiv bei SCHEU-DENTAL erhältlichen Strips sind für eine Vierfachenwendung ausgelegt und mit einem scanbaren Code versehen. So müssen Sie wie bei allen SCHEU-DENTAL Tiefziehgeräten nur den auf den Strips aufgebrauchten Code scannen - schon sind die Parameter für den Tiefziehprozess, wie z.B. Heiz- und Abkühlzeiten, voreingestellt. Auch runde Folien (Ø 120-125 mm) können mit dem BIOSTAR[®] 4-Aligner problemlos tiefgezogen werden, um so bis zu 2 Aligner gleichzeitig zu produzieren.

Beste Ergebnisse für unterschiedliche Indikationen:



Aligner

Material:

DURAN[®]+, CA[®] Pro+, UNIQ pd, UNIQ+ pd

Unser Service geht auch über den Kauf eines Tiefziehgerätes hinaus:

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie unser Team in der technischen Kundenberatung oder vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Außendienst. www.scheu-dental.com/kontakt

